



- F1 Hızlı kayıt ekranında KVKK göre geliştirme tamamlandı. Buradaki amaç hastanın kendi bilgilerinin kimlerle paylaşılmasına izin verdiğinin tutulmasıdır.

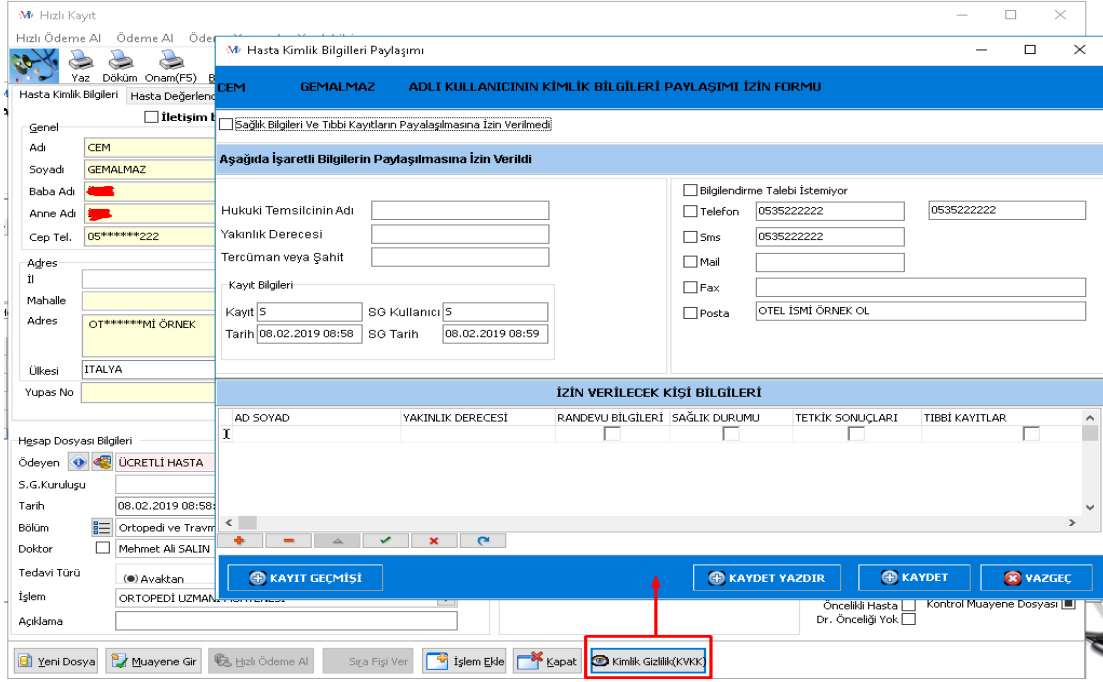


- Eğer hasta YUPAS No varsa; Medula Hasta rapor bul ekranında hasta yupas no otomatik gelmesi ve manuel düzeltilmesi sağlandı. Böylece yurt dışı hastalarının da TC olmadan YUPAS göre hasta raporlarının sorgulanması sağlandı.
- Bulaşıcı hastalık takip verisinin USS silinmesi sağlandı.

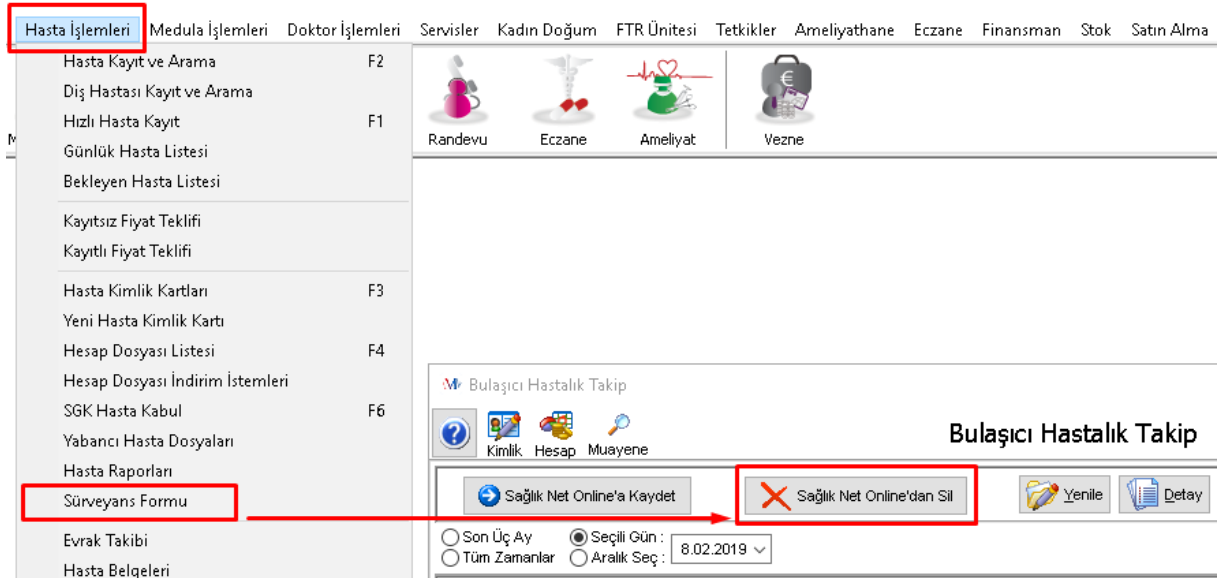

- Uss toplu gönderimde hata/uyarı alınsa da devam etmesi sağlandı.
- Kapalı vezne ekranında, detay ekrana excele gönderme özelliği eklendi.
- Hesap dosyasında uss hasta kaydı yaparken bölüm tanımlarından sağlık net gönderilmesin işaretliyse hasta kaydı gönderilmesin olarak ayarlanması sağlandı.
- Kullanıcıların belirlenen periyotlarda şifrelerini değiştirmesi sağlanmıştır.
 - >> Login Yaptığında Şifre Değişikliğini Kontrol Et=0
 - >> Login Yaptığında Şifre Değişikliği Yapılması Gereken Süre(Gün) =90 parametreleri varsayılan değerleri görüldüğü gibi eklenmiştir.

Login Yaptığında Şifre Değişikliğini Kontrol Et=1 yapıldığında kullanıcıların ilk girişlerinde user tablosunda bulunan SIFREGUNCELLEME alanına giriş yaptıkları tarih yazılmaktadır. Bundan sonra belirtilen süre geldikten sonra giriş yaparken şifre değiştirme ekranı çıkarak şifreyi değiştirmesi zorunlu hale getirilmiştir. Kullanıcı tanımlarındaki diğer sekmesine son şifre değiştirme alanı eklendi. Burada boş olanlar daha henüz hiç giriş yapmamışları ifade eder.


- 'Stok Detayında Kod Değiştirilmesin' parametresi varsayılan değeri '0' olarak eklendi. Değeri 1 yapıldığında stok kartındaki kodu alanı read only olmaktadır. Kodu bazı durumlarda değiştirmek istenirse kodu alanına çift tıklayınca değiştirilmesi sağlandı. Çift tıklayınca değiştirme durumunda istenirse şifre verebilirsiniz. "Stok kodunu değiştirme şifresi" tanımlanırsa çift tıkladığınızda şifre sorması sağlandı. Şifre doğru girilirse kodu alanı değiştirilebilir.
- "Malzeme iptalinde eczaneye mesaj gönderilsin" parametresi eklendi. Değeri 1 yapıldığında ve iptal edilen işlem mlz ise kullanıcı tanımında eczane işaretli kullanıcıların hepsine iptal bilgisi gitmesi sağlandı. (İlaç iptalindeki durum aynen devam etmektedir)
Not: Uygulama Birimi deposundan kullan seçili olmaması gerekir. Bu durumda kendi deposundakini iptal ettiği için ana depo / eczane ye mesaj göndermesine gerek yok.
- Medula Yurtdışı Aktif İlaç Sorgula metodu ilaç rehberine eklendi.

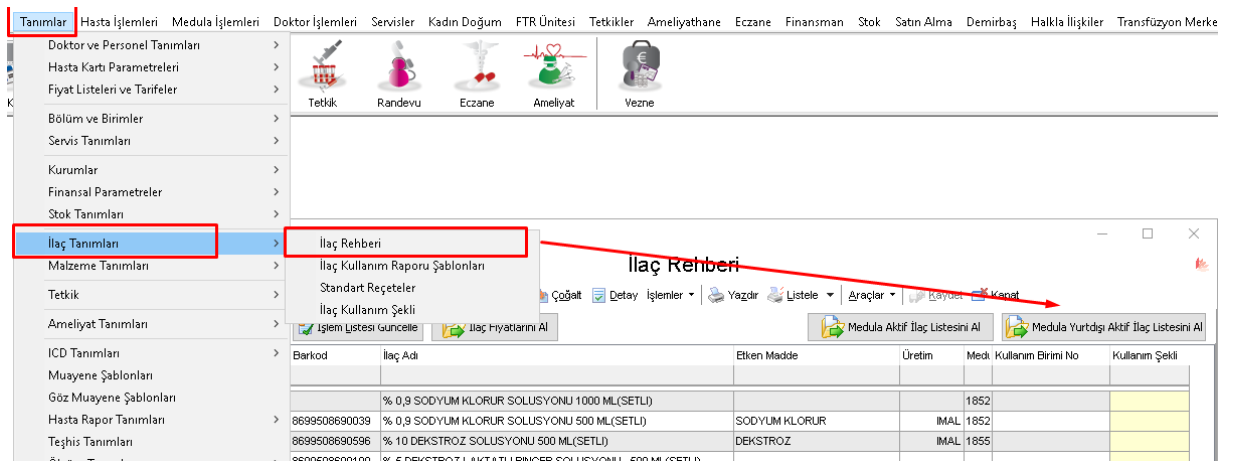

The screenshot shows the Medisoft HBYS 3.9.4 software interface. The 'Tanımlar' menu is open, and the 'İlaç Rehberi' option is selected. The 'İlaç Rehberi' window is displayed, showing a table of active drugs. The table has columns for 'Barkod', 'İlaç Adı', 'Etken Madde', 'Üretim', 'Medi. Kullanım Birimi No', and 'Kullanım Şekli'. The table contains three rows of data:

Barkod	İlaç Adı	Etken Madde	Üretim	Medi. Kullanım Birimi No	Kullanım Şekli
	% 0,9 SODYUM KLORÜR SOLUSYONU 1000 ML(SETLİ)			1852	
8699508690039	% 0,9 SODYUM KLORÜR SOLUSYONU 500 ML(SETLİ)	SODYUM KLORÜR	IMAL	1852	
8699508690596	% 10 DEKSTROZ SOLUSYONU 500 ML(SETLİ)	DEKSTROZ	IMAL	1855	

- Hasta bazlı kullanım yapılan yerlerde, sayım sürecinin sağlıklı olması için hasta üzerinde kalan stokların otomatik imha edilmesi servisi eklendi. (Bu servisle imha edilecek stoklar sadece tamamlanmış yatışlardaki kayıtlardır.) Dönem kapatma aşamasındaki hasta bazlı stok kontrolünden kaynaklanan yavaşlık sorunu giderildi. Hasta kalanlarını sayıma yazma servisi düzenlendi.

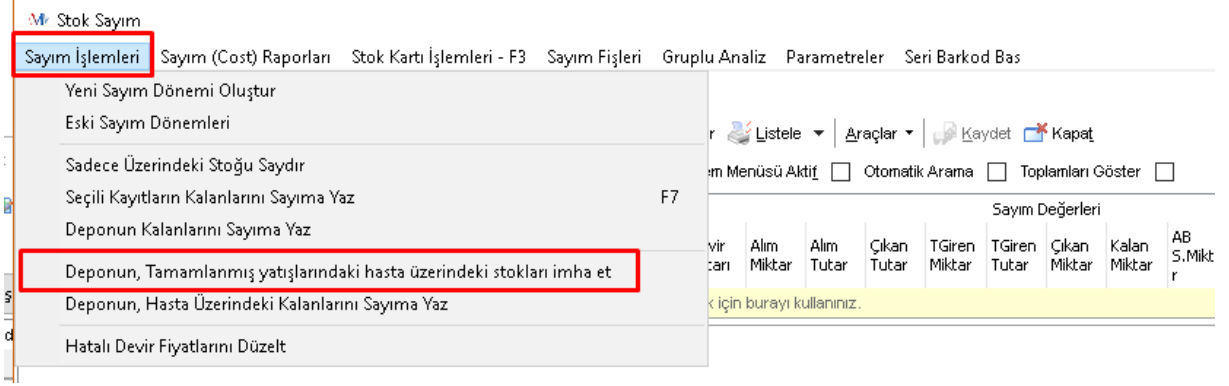


- UTS web servisi yabancı hastalara pasaportla bildirim yapılabilmesi sağlandı.
- VIP hastalarda yapılacak bilgilendirme öncesinde konfigrasyon tablosundaki "Mail Host" ayarlarını yapmalısınız.
 - >> "VIP Hastaya dosya açıldığında yetkiliye mail gönderilsin" parametresinin değeri 1 yapılmalıdır.
 - >> "VIP Hastaya dosya açıldığında bilgilendirilecek e-mail" değeri bilgilendirilecek mail grubu yazılmalıdır. (vip@ornek.com.tr)

Kullanımı: Kimlik kartındaki finansman sekmesinde VIP olarak işaretlenen kimlik kartlarına dosya açıldığında tanımlanan mail grubuna mail atılması sağlanır.

- MEDULA Kullanım Kılavuzu güncellenmesi devredilen Kurum bilgisine "31-60/f12, f13, f14 kapsamında sigortalı olanlar" eklendi.
- 'Kimlik Gizlilik Kontrolü yapılınsın' parametresi varsayılan 0 olarak eklendi. 1 yapıldığında f2 hasta arama ekranında f12 yeni dosya ve f1 hızlı kayıt seçeneklerinden biri seçildiğinde hastanın o güne ait girilmiş bir kimlik gizlilik bildirim yoksa kullanıcıya giriş yapması için bilgilendirme mesajı çıkartarak kimlik gizlilik ekranını açılır. Bu kimlik gizlilik ekranında kaydet veya kaydet yazdır butonlarına basıldığında ilgili hareketlerinde ayrıca loglanması sağlandı. kimlik gizlilik ekranının sol alt tarafına "kayıt geçmiş" adında buton eklendi. bu butonla ilgili kaydın log hareketlerinin gözükmesi yetkiye bağlı olarak eklendi. giriş şifresi varsayılan 112233

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

- E-doğum web servisi misafir hekim girişi eklenmesi yapıldı.
- Randevu ekranındaki sms'in [HWEBSIFRE] alanını içermesi sağlandı.
Örnek şablon:
SAYIN [ADSOYADI], Web Şifre:[HWEBSIFRE]
SAYIN Cem Gemalmaz, Web Şifre:435816
- Tedavi tabela uyg sekmesinde de eczaneden talep fişinin karşılanma durumunun sorgulanması sağlandı. form üzerine eczane sorgula butonu eklendi. Ayrıca ilaç mlz uygulama sekmesindedede sorgulama için ilave olarak "eczane sorgula" butonu eklendi.

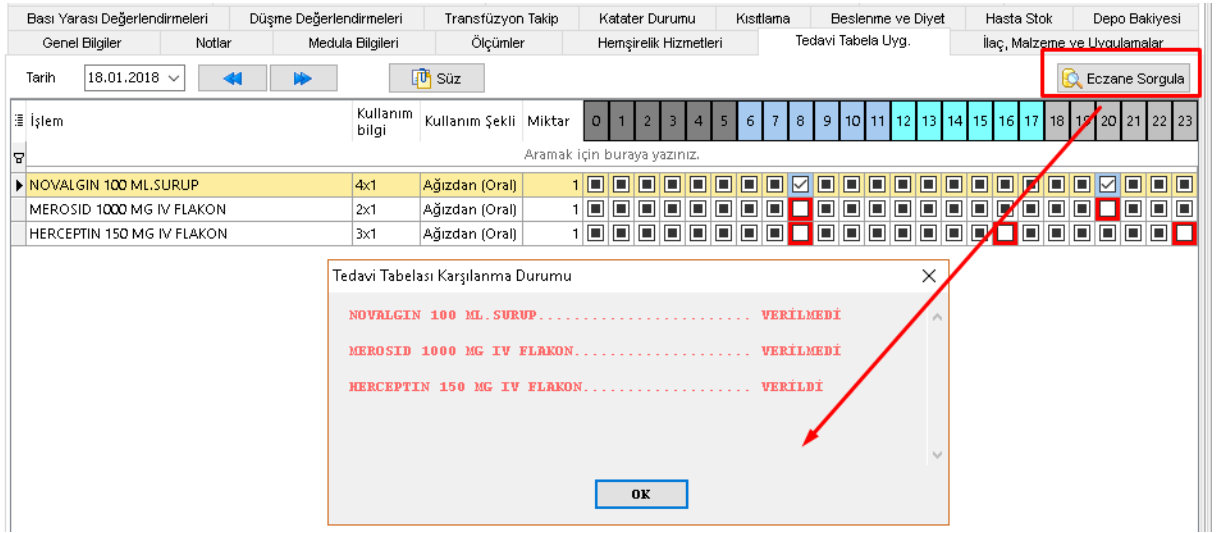

Bası Yarası Değerlendirmeleri	Düşme Değerlendirmeleri	Transfüzyon Takip	Katater Durumu	Kısıtlama	Beslenme ve Diyet	Hasta Stok	Depo Bakiyesi																					
Genel Bilgiler	Notlar	Medula Bilgileri	Ölçümler	Hemşirelik Hizmetleri	Tedavi Tabela Uyg.	İlaç, Malzeme ve Uygulamalar																						
Tarih: 18.01.2018	Süz		Eczane Sorgula																									
İşlem	Kullanım bilgi	Kullanım Şekli	Miktar	Aramak için buraya yazınız.																								
NOVALGIN 100 ML.SURUP	4x1	Ağızdan (Oral)	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
MEROSID 1000 MG IV FLAKON	2x1	Ağızdan (Oral)	1																									
HERCEPTIN 150 MG IV FLAKON	3x1	Ağızdan (Oral)	1																									

- Tedavi tabela uygulama sekmesinde hastanadan yada birim deposundan kullanır seçildiyse satırın renkli gösterilmesi sağlandı. birim deposu seciliyse çok acık kırmızı, hastadan kullanılır seciliyse çok acık mavi olarak gözükmesi sağlandı.
(her iki uygulama ekranında da renklendirme yapıldı. tedavi tabela uyg sekmesinde satır, diğer sekmede ise sadece ilgili hücre renklendirildi)
- Tamamlandı durumuna alınan yatış üzerindeki order ların uygulanması parametrik olarak engellendi. "Tamamlanmış yatıştaki order uygulanmasın" parametresi varsayılan 0 olarak eklendi.
Not: uss'de, tamamlandı yapılan yatışlardaki bulunan zamanında uygulanmayan order'lar , hasta taburcu edildikten sonra uygulandı yapıldığında işlem girişi tarihi yatış çıkış tarihinden sonra olduğu için sıkıntı yaşanabiliyordu. bu sebeple bu kontrol eklendi.


Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

- Ameliyat kartındaki anesteziist seçimi listesine sadece anestezi dr ları gelmesi sağlandı.
- "Geçmiş tarihe yatış izlem girilmesin" varsayılan sıfır olacak şekilde parametre eklendi. değeri 1 yapıldığında geçmişe izlem girişine izin vermemektedir.
- USS Sağlık Tesis Bilgileri Veri Paketi entegrasyonu menü uss işlemlerinin altında.



- Hesap dosyası iptali yapılırken USS den iptal yapılınsın mı diye soru sorması sağlandı.
- Dosyada indirim kartı varsa açılışında uyarı versin" parametresi varsayılan değeri 0 olarak eklenmiştir. uyarı vermesi için bu parametrenin değeri 1 yapılmalı ilave olarak giriş yapan kullanıcıda vezne olmalısı gerekmektedir.
- ICD10 kodları güncellemesine yüksek riskli gebelik işaretlemesi eklendi.
- SG/Kurum faturalarının iadesinde , fatura tutarı belirli bir tutarın üzerindeyse şifre sorması sağlandı.
"xx Numaralı Şubede Kurum/SG Fatura İade Şifresi" şifresi varsayılan tanımlı değildir.
"xx numaralı subede kurum ve sg iade faturası iptalinde kontrol limit tutarı" varsayılan değeri 10000000 dur.
- Muayene İşlemleri sekmesinde tüm zamanlar butonu aktif olduğunda zaman hariç diğer filtrelemeler pasif oluyor fakat zaman aralığı tüm zamanlar dışında herhangi bir zaman aralığında tekrar süzme yaptığında filtrelemeler aktif olmuyor.Bu sorun düzeltildi.
- Yüksek riskli gebelik entegrasyonu tamamlanmıştır. Muayene ekranında gebelik tanısı girildiği zaman otomatik USS web servisleri çalışmaktadır. Aynı zaman da Özgeçmiş alanında Yüksek Riskli Gebelik çentik seçili hale geliyor ve tüm branş muayenelerinde görünmesi sağlandı.


- Onaylama sistemi devrede olduğunda , yani doktorun girdiği işlemler dosyada onaya düşer. Vezne yada yetkili bu işlemleri onayladığında dosyaya işlemlerin girişi sağlanır. Bu var olan bir özelliktir. Parametresi varsayılan 0 olacak şekilde sistemde vardır. '1 nolu subede Girilen doktor istekleri onay beklesin' Doktorlar daha önceden onayda bekleyen işlemleri aynı hasta için tekrar girmemek adına görmek isterler. Bu sebeple işlem gir ekranına onaysız işlemler diye bir buton eklendi. Bu buton yukarıda bahsedilen onaylama sistemi parametresi aktifse gözükmektedir.

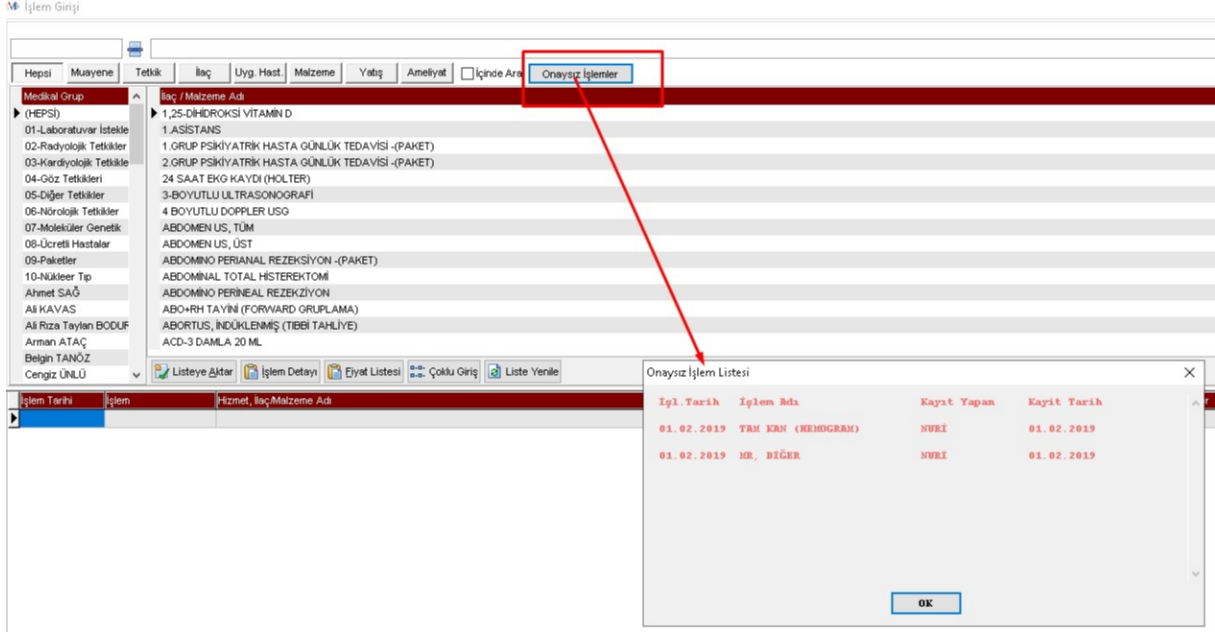


- Hesap dosyasında birden fazla ameliyat girildiğinde ameliyatlardan biri doldurulup tamamlandı yapıldıktan sonra, içi boş doldurulmamış beklemede yada işlemde olan ameliyat kartında genel bilgiler sekmesindeyken sağ tuş yapıp diğer ameliyatın bilgilerinin kopyalanması sağlanmıştır.

Not: - Genel Bilgileri ve Ameliyat Ekibi


- Anestezi Müdahalesi
- Anestezi Takibi
- Anestezi Notları sekmesindeki bilgiler kopyalanır

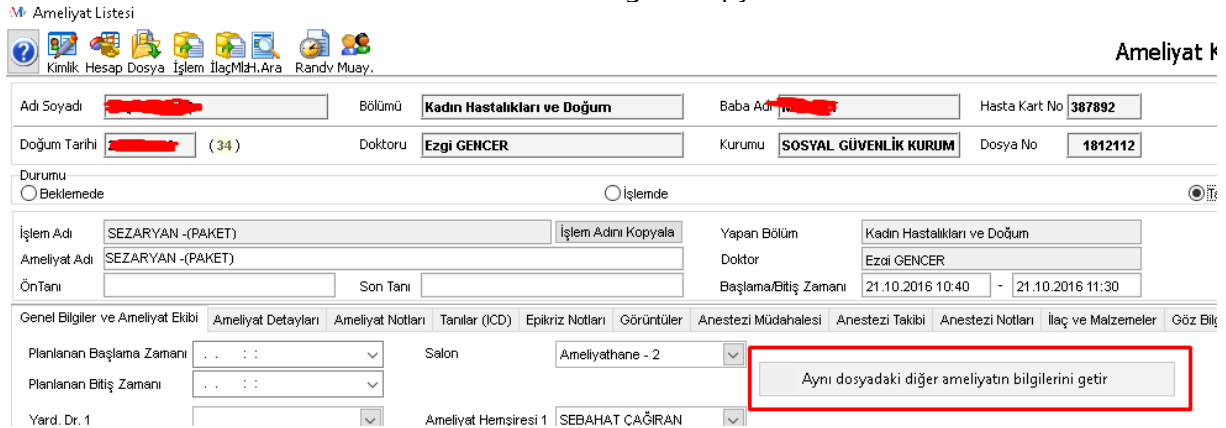

- Yatış>Tedavi tabelası> Yeni yazılan Tedavi tabelasının liste halinde gösterilmesi sağlanmıştır. Özellikle yb hastalarında ilaç sayısı fazla olduğundan, mevcut yapıda tabela üzerindeki yaz düğmesi tabela kayıt edilmediği için boş yazdırıyordu. Dr'da kayıt etmeden yanlış yazılan ilaç mı var mı diye tek ekrandan aşağı yukarı gitmeden görmesi sağlandı.

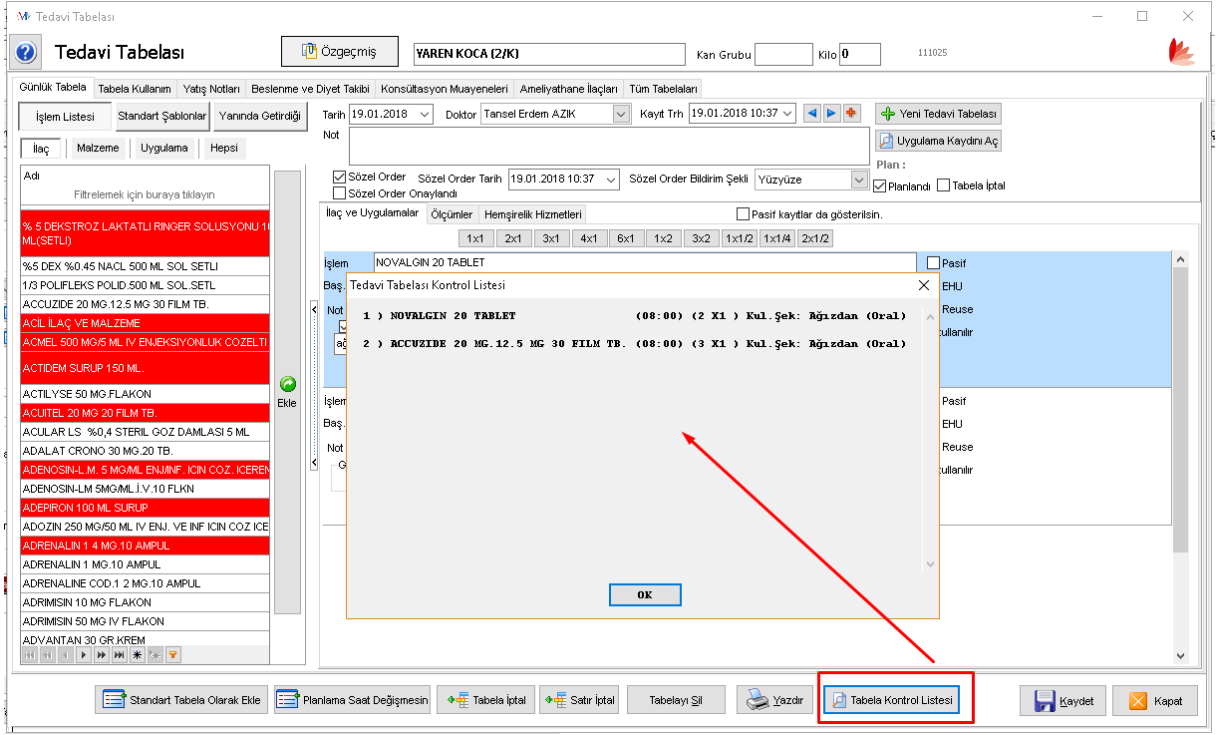

- Arıza ve Şikayet Takip listesi ekranından Demirbaş seçme özelliği eklendi.

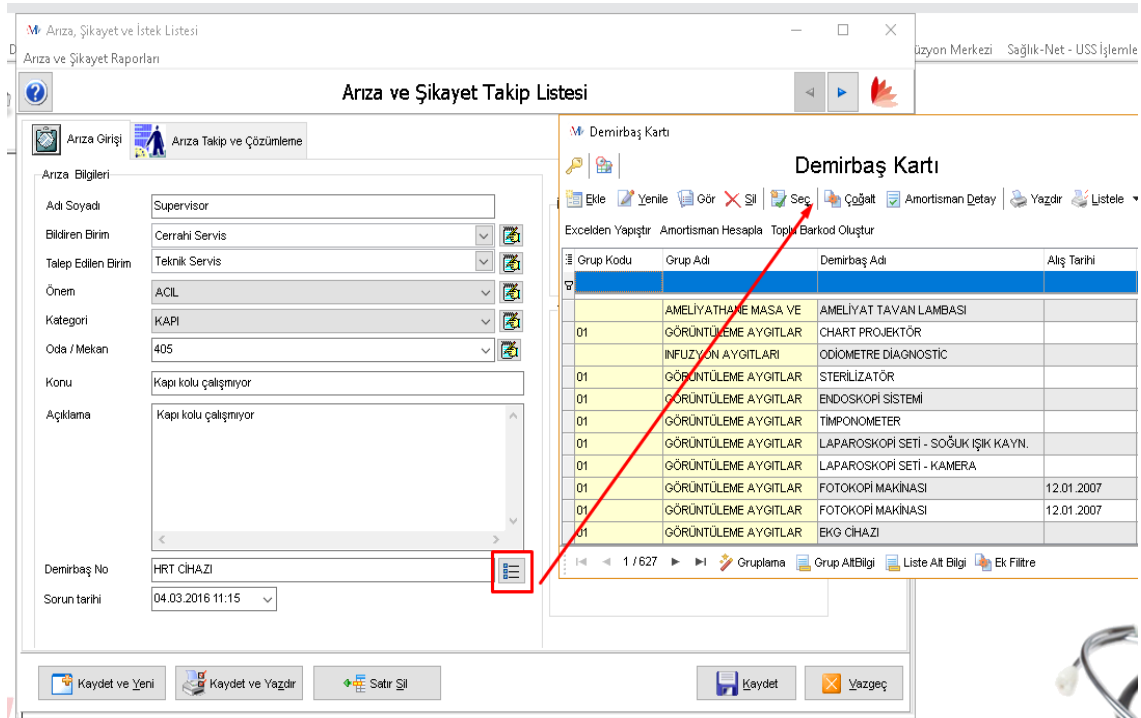

Grup Kodu	Grup Adı	Demirbaş Adı	Alış Tarihi
01	AMELYATHANE MASA VE GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	AMELYAT TAVAN LAMBASI	
		CHART PROJektör	
		ODİOMETRE DIAGNOSTIC	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	STERİLİZATÖR	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	ENDOSKOPI SİSTEMİ	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	TİMPONOMETER	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	LAPAROSKOPI SETİ - SOĞUK IŞIK KAYN.	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	LAPAROSKOPI SETİ - KAMERA	
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	FOTOKOPI MAKİNASI	12.01.2007
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	FOTOKOPI MAKİNASI	12.01.2007
01	GÖRÜNTÜLEME AYGITLAR	EKG ÇİHAZI	

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

- Konfig'te 'İşlem Girişi' bölümü altına 'İşlem bazında paket kullanımı aktif' varsayılan değeri boş olacak şekilde bir parametre eklenmiştir. Değeri 'PKT' yapıldığında sistem aktif olur. Fiyat listesinde en sağda paket tanım sekmesi aktif olur. Burada çalışma mantığı şöyledir; Mesala bir bir ameliyat kartına girilir. Paket sekmesine girilerek bu ameliyat girildiğinde dosyaya hangi işlemlerin girileceği ve bu işlemlerin hangi işlem fiyatlarını baz alacağını yazılması gerekiyor. Yani her ilave girilecek işlem için fiyat listesi gibi 6 tane fiyatı buraya tanımlamamız gerekiyor. Baz fiyat kullan true yapılırsa bu 6 fiyat tarifeye sokulur false bırakılırsa normal fiyat listesindeki (TITEM) fiyatları tarifeye sokulur.

Tanımlama ekranı


İşlem No	İşlem Adı	Adet	Baz Fiyat	İtem Fiyat1	İtem Fiyat12	İtem Fiyat13	İtem Fiyat14	İtem Fiyat15	İtem Fiyat16	Uygulayan Doktor
30555	AMELYATHANE KULLANIM ÜCRETİ	1	True	7807,84	0	0	2192,44	2521,3	0	
30556	ASİSTAN 1	1	True	1869,05	0	0	524,83	603,56	0	
30557	ASİSTAN 2	1	True	986,43	0	0	278,99	318,54	0	
30558	ASİSTAN 3	1	True	986,43	0	0	278,99	318,54	0	
30559	ANESTEZİ ÜCRETİ	1	True	2967,66	0	0	833,32	958,32	0	
30560	TIBBİ GAZ	1	True	2732,74	0	0	767,35	882,46	0	

Giriş Ekranı;


İşlem Tarihi	İşlem	Hizmet, İlaç/Malzeme Adı	Uygulayan Bölüm	Uygulayan Doktor	İsteyen Doktor	Açıklama	K.P.Dahil	Adet	Hasta Net Tutar
08.02.2019 15:58	Ameliyat	ABDOMINOPLASTİ	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	11.023,50
08.02.2019 15:58	Uygulama	AMELYATHANE KULLANIM ÜCRETİ	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	7.807,84
08.02.2019 15:58	Uygulama	ASİSTAN 1	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	1.869,05
08.02.2019 15:58	Uygulama	ASİSTAN 2	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	986,43
08.02.2019 15:58	Uygulama	ASİSTAN 3	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	986,43
08.02.2019 15:58	Uygulama	ANESTEZİ ÜCRETİ	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	2.967,66
08.02.2019 15:58	Uygulama	TIBBİ GAZ	KBB	SÜLEYMAN ZENNUI	SÜLEYMAN ZENNUI		Hayır	1	2.732,74

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

- Güvenlik Raporlama Online Bildirim Sistemi Web servisi entegrasyonu yapıldı. Sistemin devrede olması için önce GRS den "GRS Erişim Anahtarı" alınmalı ve Konfig tablosunda GRS Erişim Anahtarı değer kısmına yazılmalıdır.

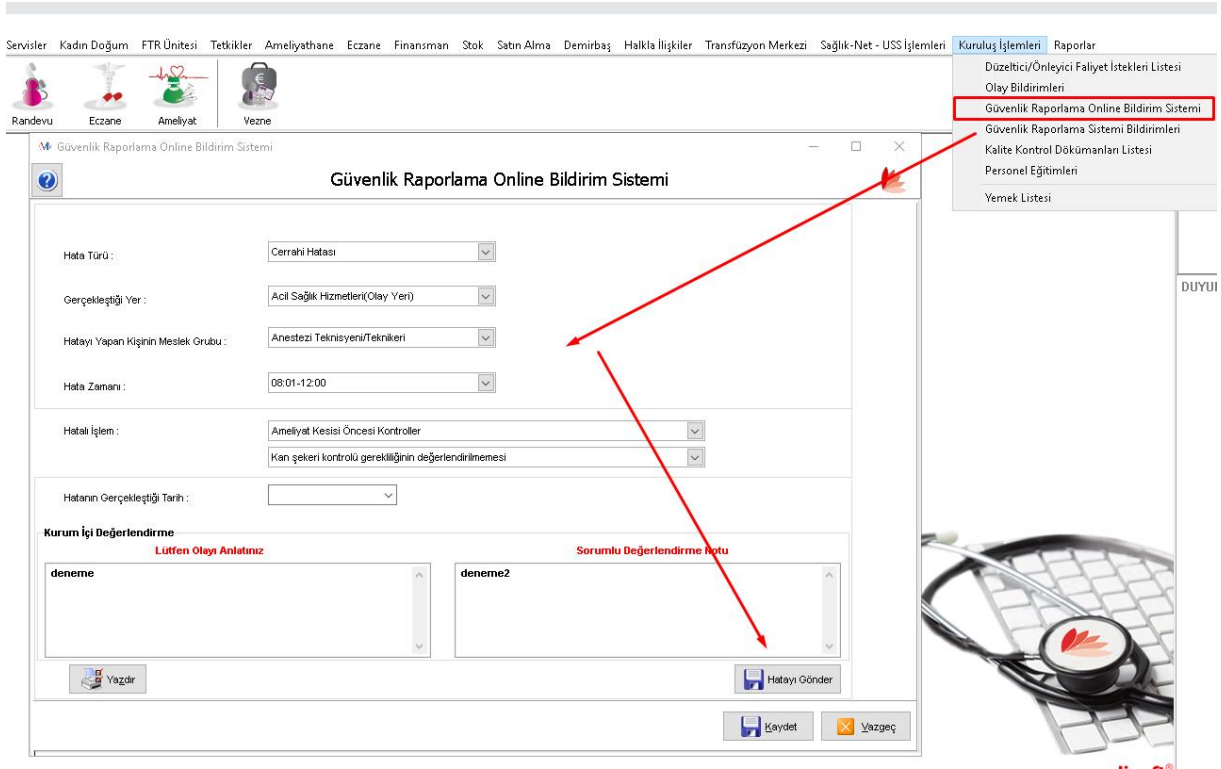

- Renkli reçete versiyon 2 entegrasyonu tamamlanmıştır. Doktor Pclerinde bir kere mahsus "Renkli reçete Şifreleme DLL Kayıt" basmak gerekiyor.

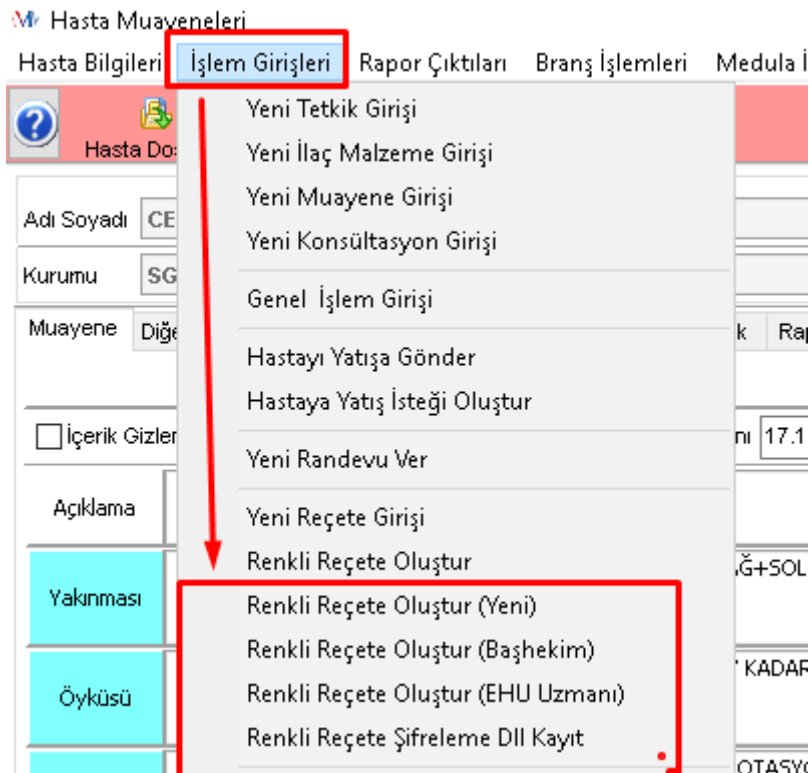


Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

- Üts (Ürün Takip Sistemi) tüm servisleri tamamlanmıştır.

ÜTS Alım Bildirimi Nasıl Yapılır;

Üts alım bildirimini alış fatura listesi ekranında ÜTS tabından yapmaktayız. Kabul edilecek ürünleri sorgulamak için ilk olarak firma/ kurum kodu nun dolu olması gerekmektedir. Üts ürünleri sorgulayarak hemen soldaki gride basacaktır. Tüm ürünler ,alım bildirimini yapacak ise tümünün alımını yap butonundan yapılır. Yalnız seçili ürün yapılacak ise grid üzerinden satır seçilerek sağ tuş ile alma bildirimini yap seçilir. Başarıyla gerçekleşti bildirimini aldıktan sonra eğer istenirse ürün, hasta dosyasına ekle butonuyla hastanın dosyasına eklenir.

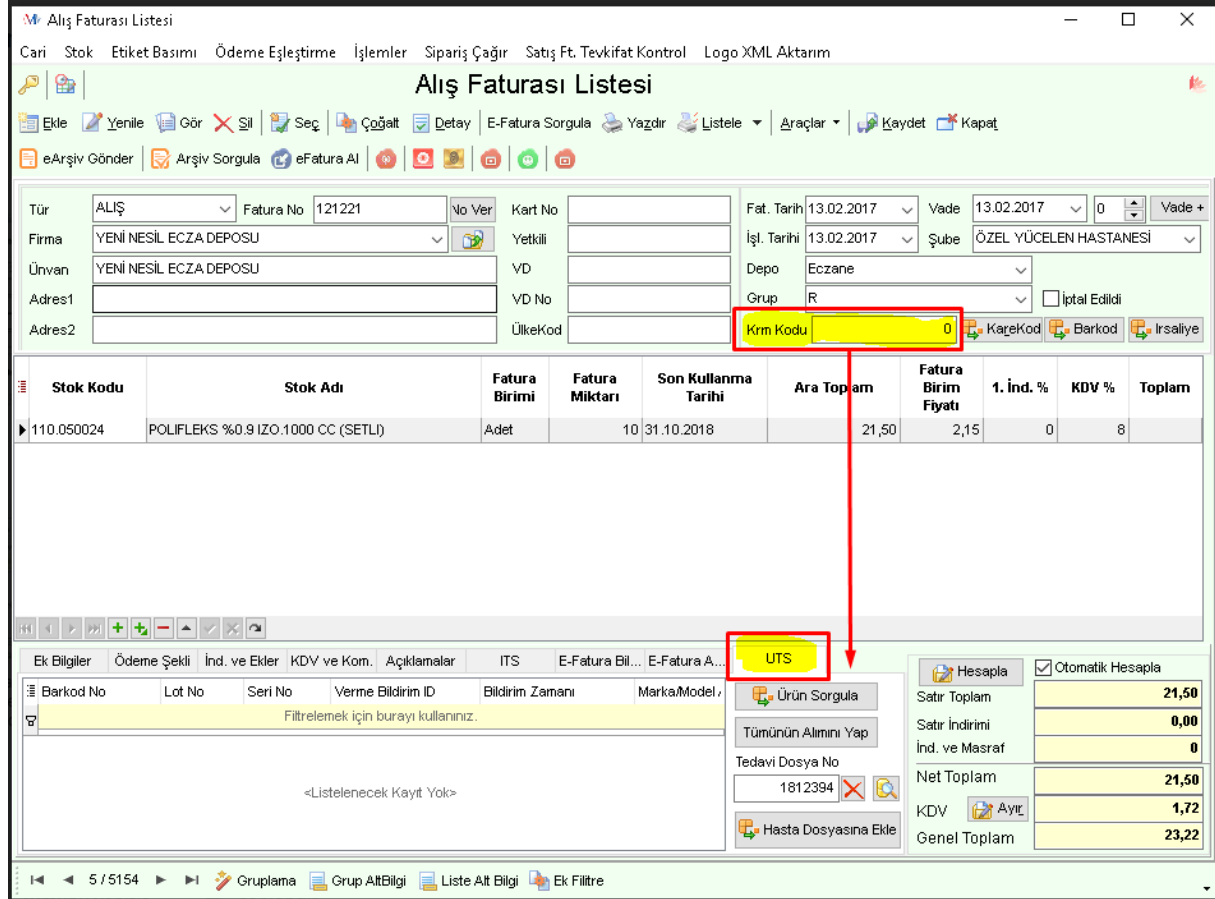

The screenshot shows the 'Alış Faturası Listesi' (Purchase Invoice List) window. The form at the top contains the following fields:

- Tür: ALIŞ
- Fatura No: 121221
- No Ver: No Ver
- Kart No: Kart No
- Fat. Tarih: 13.02.2017
- Vade: 13.02.2017
- Vade +: 0
- Firma: YENİ NESİL ECZA DEPOSU
- Yetkili: Yetkili
- İşl. Tarihi: 13.02.2017
- Şube: ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ
- Ünvan: YENİ NESİL ECZA DEPOSU
- VD: VD
- Depo: Eczane
- Grup: R
- İptal Edildi:
- Adres1: Adres1
- VD No: VD No
- ÜlkeKod: ÜlkeKod
- Kırmızı Kodu: 0
- KareKod: KareKod
- Barkod: Barkod
- İrsaliye: İrsaliye

The table below the form shows the following data:

Stok Kodu	Stok Adı	Fatura Birimi	Fatura Miktarı	Son Kullanma Tarihi	Ara Toplam	Fatura Birim Fiyatı	1. İnd. %	KDV %	Toplam
110.050024	POLIFLEKS %0.9 IZO.1000 CC (SETLİ)	Adet	10	31.10.2018	21,50	2,15	0	8	

The bottom right corner of the window features a 'Hesapla' (Calculate) section with the following values:

Hesapla	Otomatik Hesapla
Satır Toplam	21,50
Satır İndirimi	0,00
İnd. ve Masraf	0
Net Toplam	21,50
KDV	1,72
Genel Toplam	23,22

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları



ÜTS Hesap dosyası kesinleştirmesi nasıl yapılır;

ÜTS için hasta ilaç malzeme kullanım ekranında ürün bilgileri kısmında ilk olarak mutlaka ürünün barkod numarası dolu olmalıdır.

Ardından seri numarası ve lot numarası opsiyonel olarak girilecektir. Ürünün seri numarası bilgisine sahip isek lot no boş kalabilir. Ve Tekil Bazlı takip check boxu seçilmelidir. Aynı şekilde lot numarasına sahip isek lot bazlı takip seçilmelidir.

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları


ÜTS Hesap dosyası kesinleştirmesi nasıl yapılır; (Devamı...)

Web servisten sorgulanacak parametreler tekil bazlı ve lot bazlı takip checkbox ına göre değişeceği için dikkatli seçilmesi gerekir. Eğer ürüne ait iki numaraya da sahip isek herhangi bir checkbox ı işaretlememize gerek yoktur. Kullanıcı barkod ,seri ve lot numaralarını girip doğrudan Uts butonuna basabilir.

Butona basıldıktan sonra açılan ürün takip sistemi ekranında bildirim sorgula butonuna basıldığında sistem konfigürasyon tablosuna uts başlıklı Uts sistem token ı parametresi oluşturacaktır.


Bu kısımda kullanıcıların uts den temin ettiği sistem tokenlarını alması ve konfigürasyon tablosuna kaydetmesi gerekmektedir.

Token örneği : System028cd83a-20b2-4a88-a93a-f7864142sb12

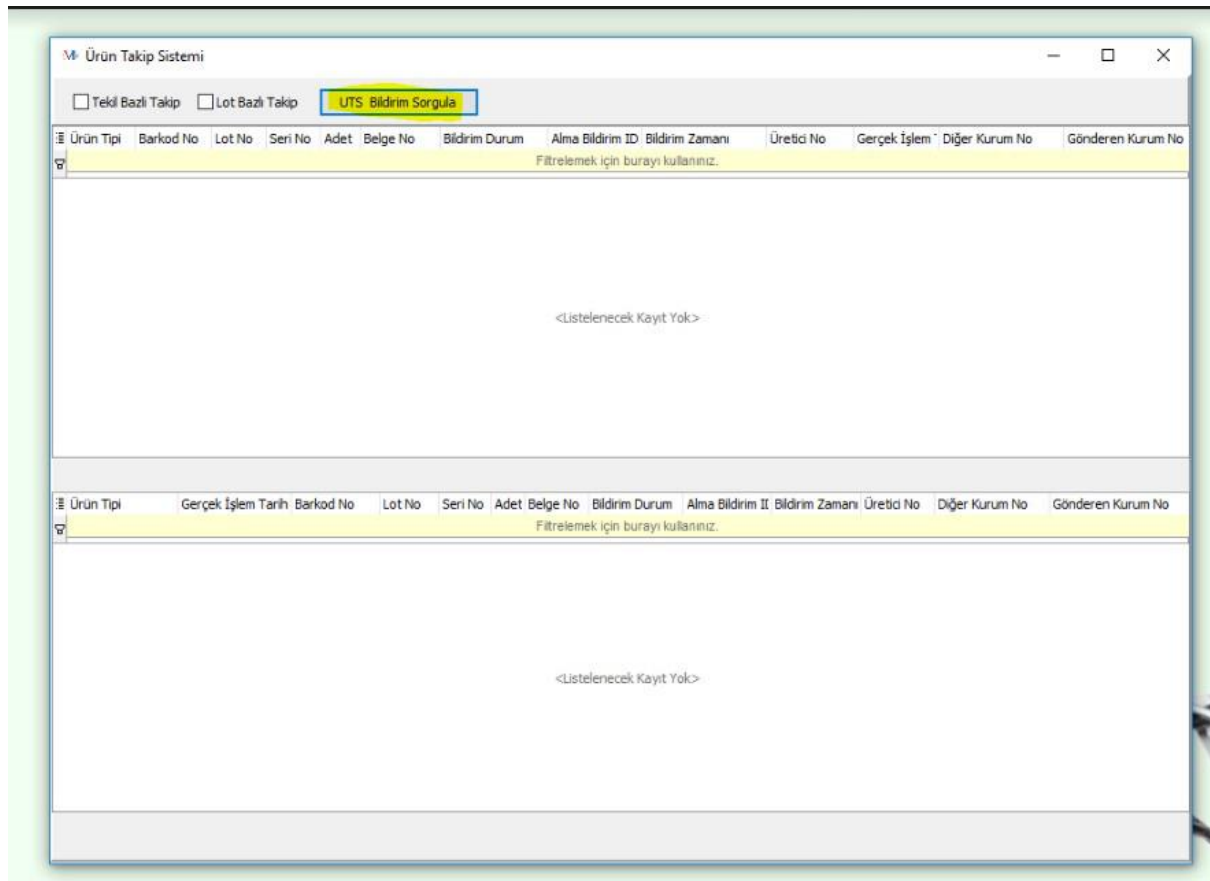

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

ÜTS Hesap dosyası kesinleştirmesi nasıl yapılır; (Devamı...)

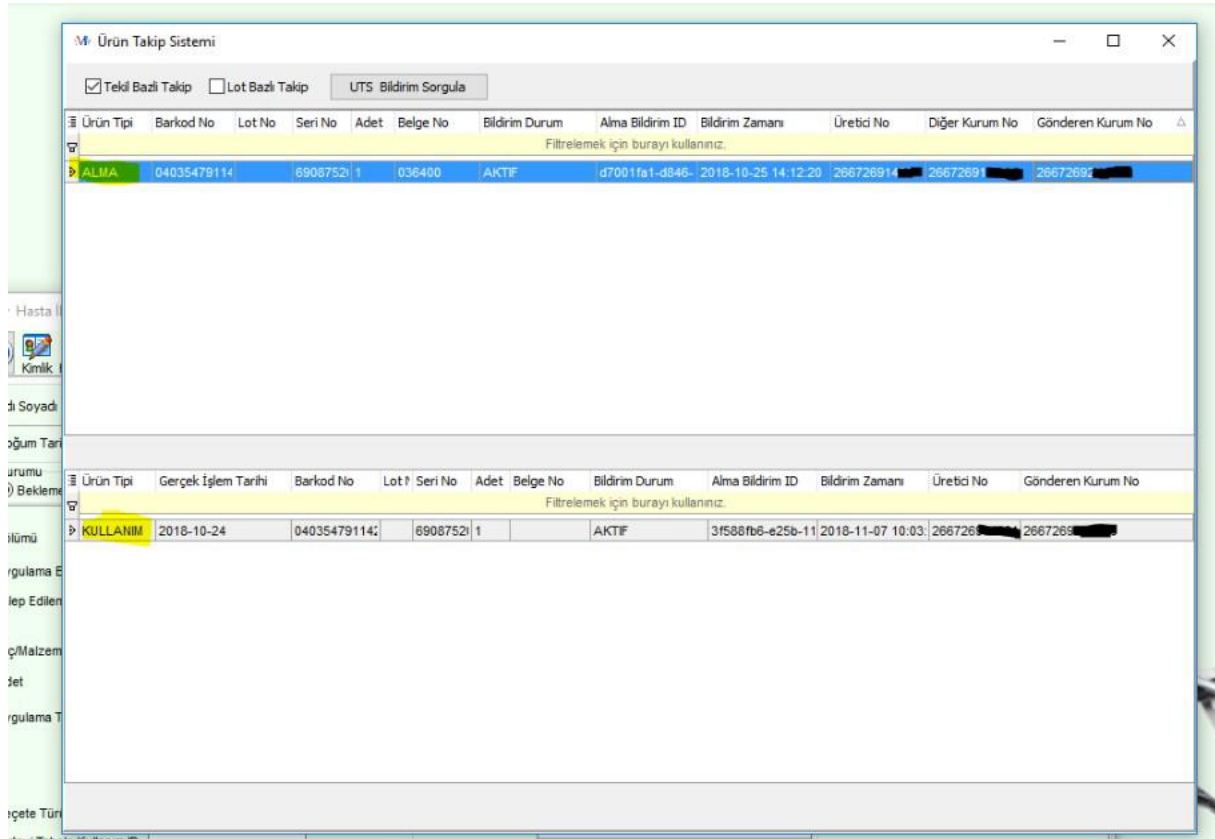

Ürün Takip Sistemi

Tekil Bazlı Takip Lot Bazlı Takip UTS Bildirim Sorgula

Ürün Tipi	Barkod No	Lot No	Seri No	Adet	Belge No	Bildirim Durum	Alma Bildirim ID	Bildirim Zamanı	Üretici No	Diğer Kurum No	Gönderen Kurum No
ALMA	04035479114		8908752	1	036400	AKTIF	d7001fa1-d046-	2018-10-25 14:12:20	266726914	26672691	26672692


Filtrelemek için burayı kullanınız.

Ürün Tipi	Gerçek İşlem Tarihi	Barkod No	Lot No	Seri No	Adet	Belge No	Bildirim Durum	Alma Bildirim ID	Bildirim Zamanı	Üretici No	Gönderen Kurum No
KULLANIM	2018-10-24	04035479114		8908752	1		AKTIF	3f588fb6-e25b-11	2018-11-07 10:03	266726914	26672691

Filtrelemek için burayı kullanınız.

Ürüne ait alma bildirimi var ise üst kısımda ,kullanım iptal gibi bildirimler ise alt kısımda çıkacaktır.

Bu kısımda kullanım bildirimi yapmak istediğimiz ürünün alma bildirimine gelip sağa tıkladığımızda kullanım bildirimini yapabileceğiz.

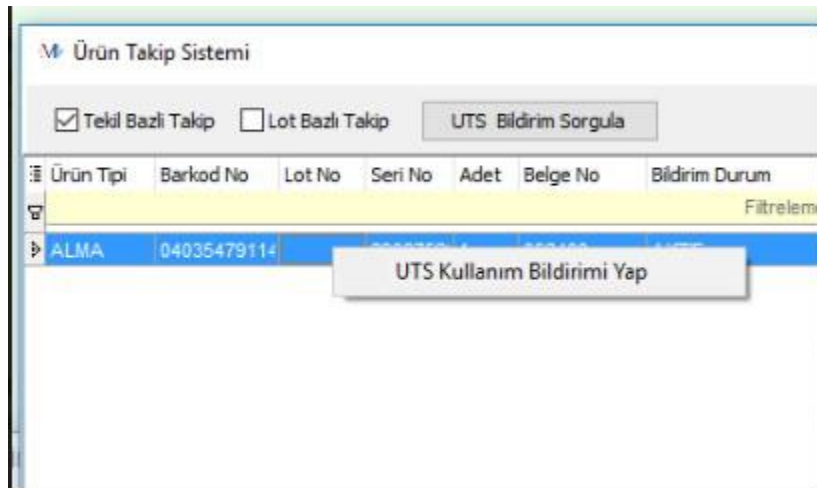

Ürün Takip Sistemi

Tekil Bazlı Takip Lot Bazlı Takip UTS Bildirim Sorgula

Ürün Tipi	Barkod No	Lot No	Seri No	Adet	Belge No	Bildirim Durum
ALMA	04035479114		8908752	1		AKTIF

Filtrelemek için burayı kullanınız.


UTS Kullanım Bildirimi Yap

Medisoft HBYS 3.9.4 Sürümünün Geliştirme Notları

ÜTS Hesap dosyası kesinleştirmesi nasıl yapılır; (Devamı...)

Kullanım bildirimini yapıldığında alma bildirimini yapılan ürün ile seçmiş olduğunuz hasta eşleştirilmiş olacaktır.Kullanım bildiriminin Uts de yapıldığından emin olmak adına tekrar bildirim sorgula dediğimizde alt kısımda ürün tipi kullanım olan satırda karşımıza çıkacaktır.

Eğer yanlış hastaya kullanım bildirimini yapıldıysa yine ürün tipi kullanım olan iptal etmek istediğiniz satıra gelerek sağa tıklayarak kullanım bildirimini iptal edebilirsiniz.

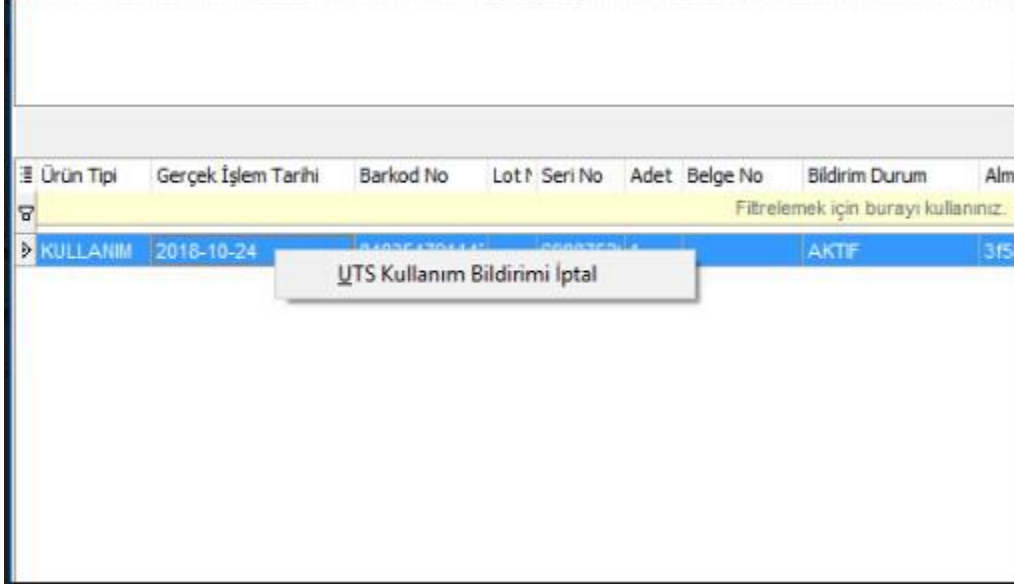

Ürün Tipi	Gerçek İşlem Tarihi	Barkod No	Lot/Seri No	Adet	Belge No	Bildirim Durum	Alma
KULLANIM	2018-10-24					AKTIF	315

İptal edilmek istenen kullanım bildiriminin bildirim durumunun aktif olmasını dikkate alınız.